







Tidu Mankoo

Odontotecnici Luc e Patrick Rutten

Descrizione del caso

Protesi di un incisivo laterale mancante

Paziente

Maschio, 22 anni

Situazione clinica

Mancanza congenita dell'incisivo mascellare laterale destro e incisivo mascellare laterale sinistro a forma di piolo

Soluzione chirurgica

Estrazione e posizionamento immediato di un impianto NobelActive® TiUltra™

Soluzione ricostruttiva

Provvisorio: Abutment SnapTemp e corona Tempshell

Definitiva: Corona su impianto

NobelProcera® ASC Full Contour Zirconia

Date degli interventi chirurgici

Aprile 2019

Durata complessiva del trattamento

3 mesi

Posizioni dei denti

Paziente con mancanza congenita dell'incisivo laterale destro e incisivo laterale sinistro a forma di piolo.

È stato effettuato il trattamento ortodontico per allineare i denti e creare uno spazio adequato per la protesi di entrambi gli incisivi laterali.

L'incisivo mascellare sinistro è stato riabilitato con una faccetta in disilicato di litio, seguita dall'estrazione dell'incisivo laterale deciduo destro con il posizionamento immediato di un impianto NobelActive® TiUltra™ e l'applicazione immediata del provvisorio.

È stato effettuato un innesto simultaneo dei tessuti molli con l'innesto di tessuto connettivo subepiteliale.







Vista clinica di un paziente con incisivo mascellare laterale destro deciduo non fuoriuscito e laterale sinistro a forma di piolo. Notare la scarsa proporzione relativa degli incisivi, l'affollamento anteriore e la mancanza di spazio adeguato per gli incisivi mascellari laterali.

Assorbimento della radice apicale dell'incisivo laterale destro trattenuto.

Situazione clinica iniziale

Pianificazione del trattamento Procedura chirurgica


Procedura protesica


Risultato







Situazione clinica dopo 14 mesi di trattamento ortodontico.

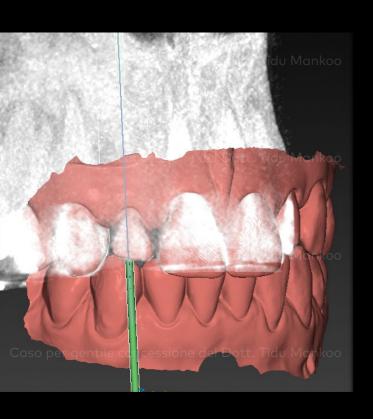

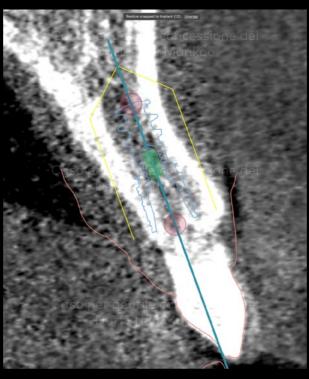

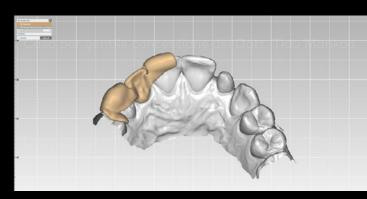

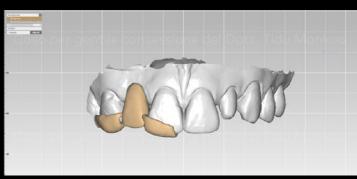

Pianificazione digitale del posizionamento dell'impianto e TempShell con progettazione digitale nel software DTX Studio™ Implant







Situazione postoperatoria immediata con corona provvisoria in posizione su un abutment SnapTemp da 3 mm e un innesto di tessuto connettivo per aumentare il volume labiale.

Impianto NobelActive® TiUltra™ 3.5 x 10 mm

Radiografia dell'impianto NobelActive® TiUltra™ con abutment SnapTemp subito dopo l'intervento.

Pianificazione del trattamento Procedura chirurgica

Procedura protesica

Risultato














A 2 mesi, sono state prese le impronte (sia convenzionali che digitali) e le tonalità sono state fornite al laboratorio. Il provvisorio è stato riadattato.


Pianificazione del trattamento Procedura chirurgica

Procedura protesica

Risultato



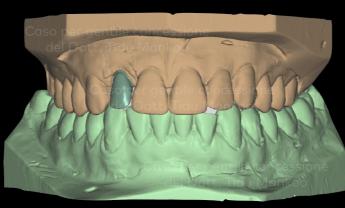

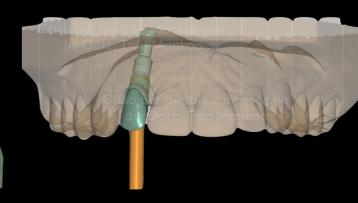







Il software DTX Studio™ Lab è stato utilizzato per progettare il manufatto in zirconio per una Corona su impianto NobelProcera® ASC Full Contour Zirconia con cutback labiale e rivestimento in ceramica sul lato labiale (lavoro di Luc e Patrick Rutten).

Pianificazione del trattamento Procedura chirurgica

Procedura protesica

Risultato







Consegna della protesi definitiva 3 mesi dopo il posizionamento dell'impianto.

Situazione clinica iniziale

Pianificazione del trattamento Procedura chirurgica

Procedura protesica

Risultato





Follow-up a 1 settimana: Vista intraorale della protesi definitiva.

Situazione clinica iniziale

Pianificazione del trattamento

Procedura chirurgica

Procedura protesica

Risultato





Situazione clinica che mostra un risultato estetico gradevole dopo un mese di follow-up.

Radiografia dell'impianto e della protesi definitiva.

Caso per gentile concessione del Dott. Tidu Mankoo



GMT 69684 IT 2006 © Nobel Biocare Services AG, 2019. Tutti i diritti riservati. Nobel Biocare, il logo Nobel Biocare e tutti gli altri marchi di fabbrica sono, salvo diversa dichiarazione o evidenza dal contesto in un caso specifico, marchi di fabbrica di Nobel Biocare. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a nobelbiocare.com/trademarks. Le immagini dei prodotti non sono necessariamente in scala. Esclusione di responsabilità: alcuni prodotti possono non avere l'approavozione alla vendita da parte degli enti normativi in tutti i mercati. Rivolgersi all'ufficio vendite locale di Nobel Biocare per informazioni sulla gamma dei prodotti esistenti e sulla loro disponibilità. Prodotto esclusivamente soggetto a prescrizione. Attenzione: le leggi federali (Stati Uniti) limitano la vendita di questo dispositivo su richiesta di un clinico, un professionista sanitario o un medico autorizzato. Per le informazioni complete relative alle prescrizioni, tra cui indicazioni, controindicazioni, avvertenze e precauzioni, consultare le Istruzioni per l'uso. Nobel Biocare non si assume alcuna responsabilità in caso di lesioni o danni a persone o proprietà derivanti dalla visione del presente caso clinico. Questo caso clinico non è destinato a raccomandare misure, tecniche, procedure o prodotti, né a fornire consigli e non è da intendersi come sostituto della formazione medica o del giudizio clinico come professionista sanitario. La visione del video non autorizza ad ignorare eventuali consigli medici professionali o a rimandare la richiesta di trattamento medico in seguito sulla base di contenuti mostrati in questo caso clinico. La procedura completa non è illustrato. Alcune seguenze sono state tagliate.