



A NOVA

NobelProcera®

Zirconia Implant Bridge

Elaborada para a estética. Sem cimento. Ampla flexibilidade.


**A nova NobelProcera®
Zirconia Implant Bridge
simplifica a parceria entre
os médicos dentistas
e os técnicos graças à
liberdade protética.**



Capacidade para compensar a colocação de implantes com pilar Multi-unit

A nova combinação de pilar Multi-unit angulado e acesso angulado ao parafuso proporciona uma liberdade protética até 55 graus*

*Em comparação com o eixo de colocação de implante

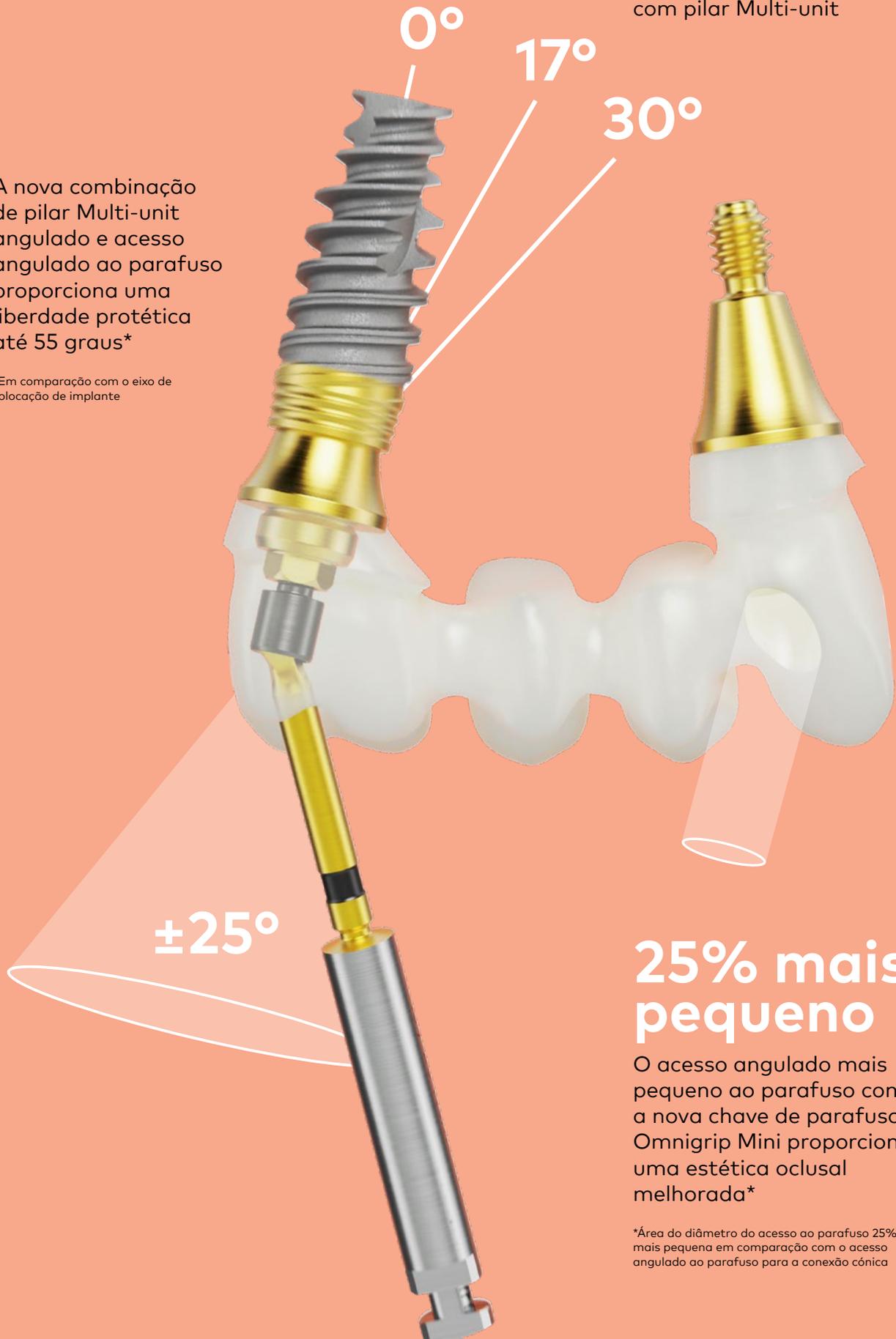

25% mais pequeno

O acesso angulado mais pequeno ao parafuso com a nova chave de parafusos Omnigrip Mini proporciona uma estética oclusal melhorada*

*Área do diâmetro do acesso ao parafuso 25% mais pequena em comparação com o acesso angulado ao parafuso para a conexão cónica

A NOVA NobelProcera® Zirconia Implant Bridge



**Elaborada para
a estética.**

Consiga restaurações de aspeto natural com o nosso novo material em zircónia DOCERAM Nacera® Pearl

Disponível em 10 tonalidades VITA

Utilize o acesso angulado ao parafuso para melhorar o acesso bucal

NobelProcera® é um portefólio de soluções de primeira qualidade que disponibiliza restaurações e serviços protéticos individualizados, topo de gama e implanto-suportados. Procuramos dar aos nossos clientes um percurso fácil e simples para soluções de prótese dentária com elevada qualidade.

Sem cimento.

O acesso angulado mais pequeno ao parafuso com a nova chave de parafusos Omnigrip Mini proporciona uma estética oclusal melhorada*.

Reduza a complexidade e poupe tempo eliminando o procedimento de adesão.

*Área do diâmetro do acesso ao parafuso 25% mais pequena em comparação com o acesso angulado ao parafuso para a conexão cônica

Ampla flexibilidade.

Disponível nas versões de contorno completo, recorte, casquilho e estrutura, com ou sem tecido mole.

A NobelProcera garante uma inspeção a 100% para garantir um ajuste passivo relativamente ao seu desenho digital.

O nosso novo material em zircónia

NOBELPROCERA®

Nacera® Pearl Shaded



Recorte



Contorno completo



Casquilho



Estrutura

Indicações e opções de desenho

Recomendado para as restaurações de ponte sobre implantes de 2 a 14 unidades, até 10 implantes.

Disponível com ou sem gengiva.

Não comprometa nada: O nosso material preferido escolhido para ir ao encontro dos mais elevados padrões de qualidade e excelente flexibilidade protética da Nobel Biocare.

Vantagens do material

Consiga restaurações de aspeto natural

- Correspondência precisa de cores VITA
- Disponível em 10 tonalidades VITA:
OM2, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C1, C2, D2

Fiável

- Recomendado para todos os tipos de restaurações, de 2 a 14 unidades
- Material produzido de forma homogénea, para evitar o risco de manchas brancas
- Resistência à flexão de 1230 MPa

Económico.

- Sem necessidade de mergulhar e secar
- Reduza o inventário, sem necessidade de armazenar materiais localmente


Propriedades físicas

Material	ZrO ₂ 3Y-TZP
Cor	Natural, muito translúcido
Densidade	> 6.04 g/cm ³
Resistência à flexão	1230 MPa
Resistência à compressão	3000 MPa
Módulos de elasticidade	205 GPa
Dureza Vickers	1300 HV 0.5
Expansão térmica	10.7 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
Condutividade térmica	2 W/mK
Intersecção linear média	< 0.4 µm
Solubilidade	< 10 µg/cm ²

Apoiamo-lo com fluxos de trabalho simplificados



Médico dentista

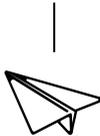

Envie uma impressão
normal ou digital

Peça ao seu laboratório dentário
que forneça restaurações

NobelProcera®

originais

Desenhe com
3Shape®

Desenhe
com o
**DTX
Studio™
Lab**



Fabrico centralizado da
NobelProcera®



Receba
restaurações personalizadas



nobelbiocare.com/nobelprocera

**Nobel
Biocare™**

GMT 70171 PT 2009 © Nobel Biocare Services AG, 2020. Todos os direitos reservados. Salvo indicação em contrário ou obviedade em determinado contexto específico, Nobel Biocare, o logótipo Nobel Biocare e todas as outras marcas comerciais são marcas comerciais da Nobel Biocare. Consulte nobelbiocare.com/trademarks para obter mais informações. As imagens dos produtos não estão necessariamente à escala. Todas as imagens dos produtos são apenas para fins ilustrativos e podem não ser uma representação exata do produto. Limitação de responsabilidade: Alguns produtos poderão não estar aprovados/ter autorização de introdução no mercado por parte da entidade reguladora em todos os mercados. Contacte o representante de vendas local da Nobel Biocare para conhecer a gama atual de produtos e a respetiva disponibilidade. Consulte nas instruções de utilização todas as informações de prescrição, incluindo as indicações, contra-indicações, avisos e precauções.